

ลำดับการใส่ ชุด Cover all (ชุดหมั)

1. ใส่ชุดปฏิบัติงาน
สวมหมวกคลุมผมให้เรียบร้อย



2. เตรียมรองเท้าและใส่ถุงพลาสติกเพื่อ
เตรียมใส่ก่อนออกจากห้องถอดอุปกรณ์



4. ใส่ Leg cover

3. ล้างมือ 7 ขั้นตอนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ



5. ใส่ cover all



6. ใส่ Boot โดยสวมไว้ด้านในชุดหมั



8. ใส่ N95

7. ถูมือด้วย alcohol gel



9. ใส่แว่นตาที่หมวกคลุมผม




10. ดึง Hood มาปิดที่ระ
ชูดซับสาบเส้นให้เรียบร้อย



11. ใส่ถุงมือคู่ที่ 1
ให้ทับปลายแขนชุด Cover all



13. ใส่ถุงมือคู่ที่ 2 ให้ทับกาวกันน้ำ

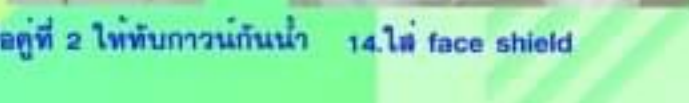

14. ใส่ face shield



15. เสร็จสิ้นการถอด
เครื่องป้องกันร่างกาย

ลำดับการถอด ชุด Cover all (ชุดหมั)

1. ถอดถุงมือชิ้นแรก ในห้องผู้ป่วย

เดินออกจากห้องผู้ป่วยมาตามทางเดินเส้นทางสีแดงเข้าห้องถอด PPE โชนสกปก



2. ถอดกาวกันน้ำ พร้อมถุงมือ



3. face shield



4. ถูมือด้วย alcohol gel



5. cover all พร้อมรองเท้าบูทโดย
ดึงชุด cover all ให้คลุมรองเท้าบูท



6. ถูมือด้วย alcohol gel



7. ถอด leg cover สวมรองเท้าที่เตรียมไว้
ข้ามมาโซนสะอาด



8. ถูมือด้วย alcohol gel



9. ถอดแว่นตา



10. ถูมือด้วย alcohol gel



11. ถอด N95



12. ถูมือด้วย alcohol gel



13. ถอดหมวกคลุมผม

14. ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

15. เสร็จสิ้นการถอดเครื่องป้องกันร่างกาย



ลำดับการถอด ชุด Cover all (ชุดหมี)

1. ถอดถุงมือชั้นแรก ในห้องผู้ป่วย
เดินออกจากห้องผู้ป่วยมาตามทางเดินเส้นทางสีแดงเข้าห้องถอด PPE โชนสกปรก



2. ถอดกาวกันน้ำ พร้อมถุงมือ



3. face shield



4. ถูมือด้วย alcohol gel



5. cover all พร้อมรองเท้าบูทโดย
ดึงชุด cover all ให้คลุมรองเท้าบูท



6. ถูมือด้วย alcohol gel



7. ถอด leg cover สวมรองเท้าแตะที่เตรียมไว้
ข้ามมาโซนสะอาด



8. ถูมือด้วย alcohol gel

9. ถอดแว่นตา



10. ถูมือด้วย alcohol gel



12. ถูมือด้วย alcohol gel



13. ถอดหมวกคลุมผม



11. ถอด N95

14. ล้างมือด้วยน้ำยาทำลายเชื้อ

15. เสร็จสิ้นการถอดเครื่องป้องกันร่างกาย



ลำดับการใส่ ชุด Cover all (ชุดหมี)

1. ใส่ชุดปฏิบัติงาน
สวมหมวกคลุมผมให้เรียบร้อย



2. เตรียมรองเท้าแตะใส่ถุงพลาสติกเพื่อ
เตรียมใส่ต่อนอกจากห้องถอดอุปกรณ์



4. ใส่ Leg cover



5. ใส่ cover all



6. ใส่ Boot โดยสวมไว้ด้านในชุดหมี



7. ถูมือด้วย alcohol gel



8. ใส่ N95



11. ใส่ถุงมือคู่ที่ 1
ให้ทับปลายแขนชุด Cover all



12. ใส่กาวกันน้ำ

10. ดึง Hood มาปิดศีรษะ
รัดขอบสาบเลื้อให้เรียบร้อย



13. ใส่ถุงมือคู่ที่ 2 ให้ทับกาวกันน้ำ



14. ใส่ face shield



15. เสร็จสิ้นการถอด
เครื่องป้องกันร่างกาย